


TOPDRY SCOPEN BEWAARKAST KNO



De MediTop TopDry scopen droog/bewaarkast is door gebruik van moderne state of the art electronica een technisch hoogstaand product geworden, met mogelijkheden om aan/in andere bestaande systemen te koppelen.

De Topdry is hoger dan alle bestaande kasten zodat tips van de lange scopen niet meer op de bodem van de droog/bewaarkast hoeft te liggen en er 2 rijen houders gemonteerd kunnen worden voor de kleinere scopen. Door de grote uit veiligheidsglas vervaardigde deuren is er goed zicht wat er in de kast hangt.

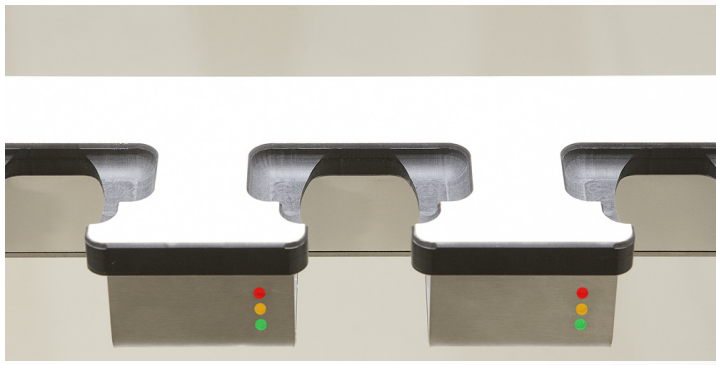


Voor de Topdry zijn de volgende voorzieningen nodig:

- WCD 230 volt (max vermogen 600 watt)
- Medische perslucht 5 bar
- Netwerk aansluiting

Enkele kenmerken van de droog/bewaarkast zijn:

- 10 of 20 kleine scopen (KNO/urologie scopen).
- Registratie systeem van scopen welke in de kast gehangen worden en weer uitgenomen zijn.
- Alle acties worden door het systeem gelogd waardoor alle meldingen (alarmen, in - en uitnames en alle andere meldingen) worden vast gelegd.
- Door HEPA filter gezuiverde overdruk in de kast en automatisch bewaking dat de overdruk altijd aanwezig is.
- Bewaking dat deuren van de droog/bewaarkast niet te lang open staan, deuren sluiten automatisch na 10 minuten.
- Bewaking als de luchtdruk om de scopen door te blazen weg valt
- Bewaking van de tijd dat de scoop in de kast hangt, zowel van de minimale als maximale tijd
- Bewaking van de doorblaas tijden en de luchtdruk waarmee de kanalen doorgeblazen worden. Als scopen niet aangesloten zijn of niet met voldoende lucht worden door geblazen dan geeft de kast hier melding van.
- Verlichting schakelt aan als deuren geopend worden
- Optie deuren doormiddel van een voetpedaal met perslucht te openen, waardoor handen vrij blijven voor de scoop
- Het techniekdeel is geschikt voor aansturing van 2 droogkasten.

Afmetingen:

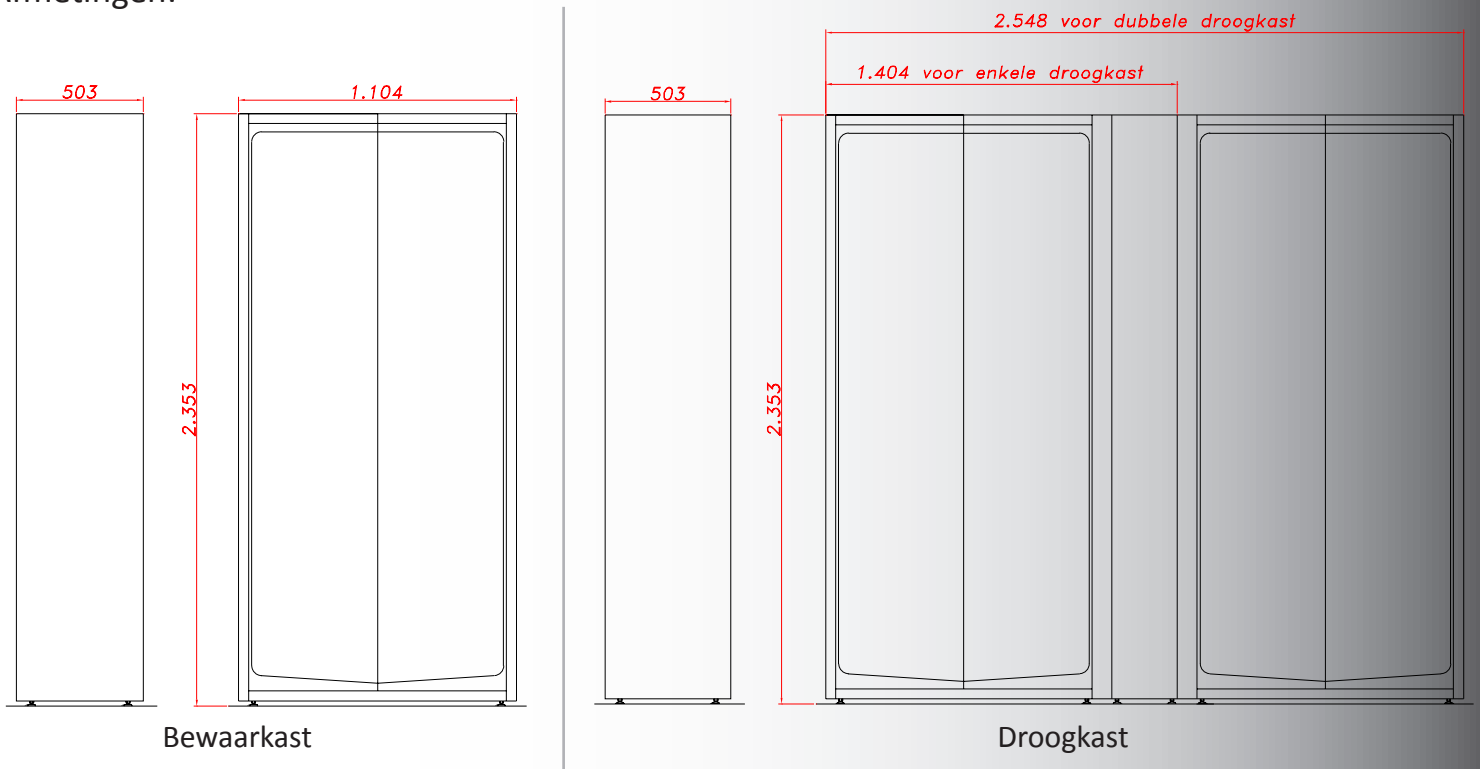

Vlasakker 22
 3417 XT Montfoort
 Nederland
 Tel.: 0348 566 100
 Fax: 0348 566 119
 Email: verkoop@meditop.nl

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op, bezoek onze website www.meditop.nl of zend ons een e-mail.